



# Kein Stress mit schwierigen Wunden. CURASORB\* Alginate.

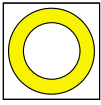

BELEGTE  
WUNDEN

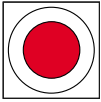

GRANULIERENDE  
WUNDEN



INFIZIERTE  
WUNDEN



**tyco**

Healthcare

**KENDALL**



Advanced  
Wound Care™


# Curasorb Alginate.

Für hohe Absorption und Integrität.

# Curasorb ZN Alginate.

Unterstützen zusätzlich eine schnelle Wundheilung.


- zweiter Verband 
- Calciumionen 
- Natriumionen 
- Wundexsudat 

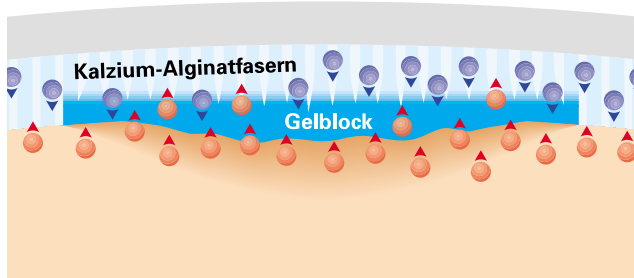

### Arbeitsweise:

- CURASORB ermöglicht mit seiner charakteristischen gelartigen Konsistenz eine hohe Materialstabilität und starke Absorption.
- Minimiert die Mazerationsgefahr in der Wundumgebung durch gute vertikale Absorption.
- CURASORB ZN enthält zusätzlich Zink-Ionen, die die Zellproliferation unterstützen und so die Belastbarkeit der Wunde und die Zellproliferation steigern helfen.

### Absorptionsfähigkeit von CURASORB im Vergleich:

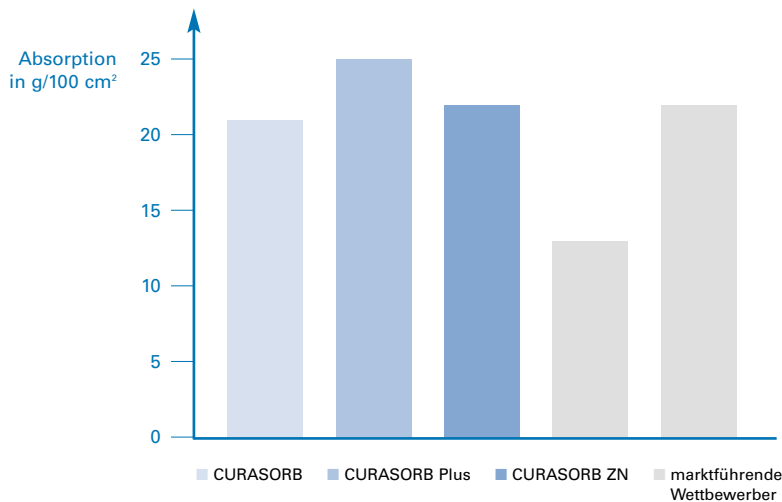

### Das spricht für CURASORB:

- **3 Varianten** für alle denkbaren Indikationen. für flexiblen therapeutischen Einsatz.
- **Plus-Version** für besonders stark nässende Wunden.
- **CURASORB ZN enthält zusätzlich Zink** und unterstützt so die Zellproliferation und die Zugfähigkeit der Wunde/Narbe.
- **Hoher Ca<sup>++</sup>-Anteil** zur Unterstützung eines hämostatischen Effektes.
- **Vorkomprimierte Fasern** schrumpfen nicht bei Vergelung und garantieren so stets den Wundkontakt.
- **Stabile Gelbildung** für einen einfacheren Verbandwechsel.
- **Exzellente Absorption.** CURASORB saugt etwa das 20fache seines Eigengewichtes.

### Hauptindikationen:

- Mäßig bis stark sezernierende Wunden.
- Chronische Wunden.
  - Dekubitus (Grad 2-4).
  - Venöse Ulcerationen.
  - Diabetische Ulcerationen (DFS).
- Tiefe Wunden und Wunden mit Taschenbildung.
- Nicht infizierte **und** infizierte Wunden.
- Belegte und nässende Wunden.
- Hauttransplantate und Spenderareale.
- Verbrennungen 2. Grades.

### Zusammensetzung:

Guluronsäure	68 mg/g
Manuronsäure	32 mg/g
Kalzium/Natrium	90:10%

Hersteller: Tyco Healthcare Group LP, Mansfield, MA 02048, USA.  
 \*CURASORB ist eine Marke der Beiersdorf AG.  
 © 2004 Tyco Healthcare Group LP. Alle Rechte vorbehalten.



P-WC-CUSORB/D

**tyco**  
Healthcare

**KENDALL**



### Vertrieb durch:

**Tyco Healthcare Deutschland GmbH**  
 Gewerbepark 1  
 93333 Neustadt/Donau  
 GERMANY  
 Tel: + 49 (0) 18 05 89 22 55  
 Fax: + 49 (0) 94 45 959-471  
 Email: info@tycohealth.de  
 Internet: www.tycohealth.de